


Автоматический анализатор осадка мочи



UriSed® Mini

Автоматизация «Золотого стандарта»

**Автоматическое
распознавание**
элементов осадка мочи
в 15 полях зрения

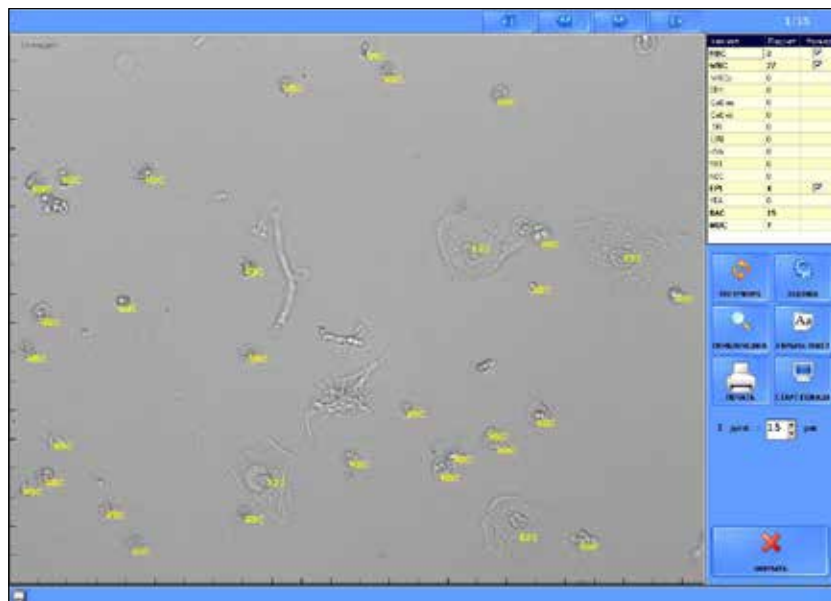

Высокая производительность

Дата и Время	ИН	+/-
21.08.2019 08:46:53	1704223	+
21.08.2019 08:47:38	1704243	+
21.08.2019 08:48:23	1704265	-
21.08.2019 08:49:05	1709842	+
21.08.2019 08:50:50	1701565	+
21.08.2019 08:51:35	1706815	-
21.08.2019 08:52:19	1704468	+
21.08.2019 08:53:03	1704243	+
21.08.2019 08:53:48	1704291	-
21.08.2019 08:54:33	1706618	-
21.08.2019 08:55:18	1701656	+
21.08.2019 08:56:48	1701354	+

Время от момента загрузки
пробы до получения результата
составляет **менее одной минуты**

Максимальная эффективность с минимальными затратами




Для работы необходимы
только одноразовые кюветы,
нет потребности в жидких
реагентах или калибраторах

1 проба = 1 кювета



Видит то, чего не видят другие

Автоматическое
распределение
кристаллов **по типам**
и бактерий **по видам**

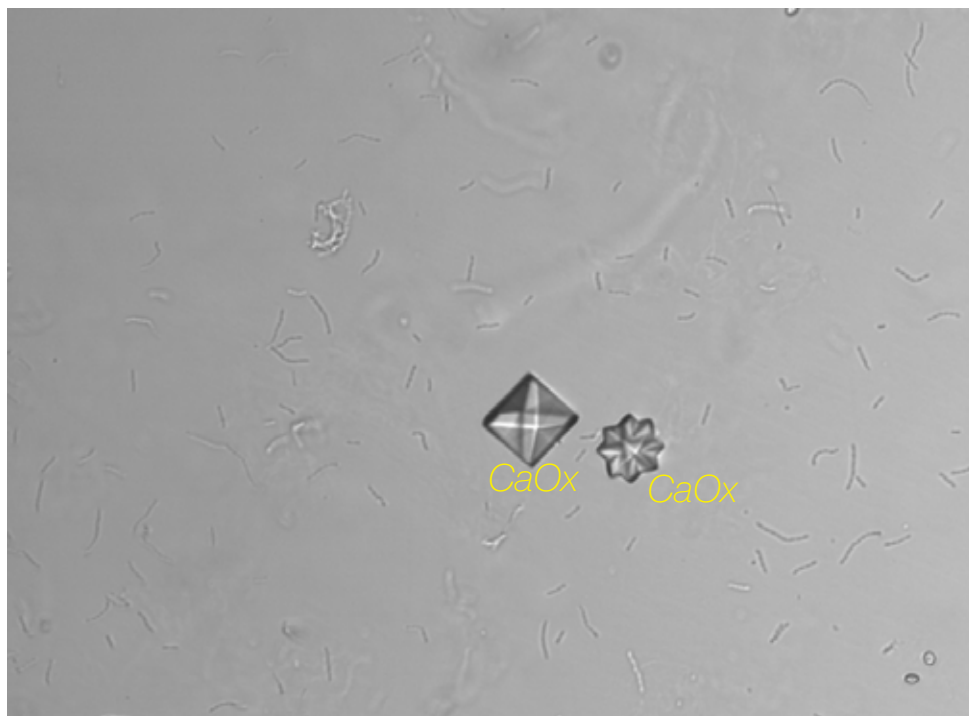

Технические характеристики

Классы автоматически определяемых частиц	Эритроциты (RBC), Лейкоциты (WBC), Скопления лейкоцитов (WBCc), Плоские клетки эпителия (EPI), Неплоские клетки эпителия (NEC), Гиалиновые цилиндры (HYA), Патологические цилиндры (PAT), Кристаллы (CRY), Моногидрат оксалата кальция (CaOxm), Дигидрат оксалата кальция (CaOxd), Трипельфосфаты (TRI), Мочевая кислота (URI), Дрожжеподобные грибки (YEA), Бактерии (BAC), Бактериальные палочки (BACr), Бактерии кокки (BACc), Слизь (MUC), Сперматозоиды (SPRM)
Технология	Цифровая микроскопия в одноразовой кювете
Производительность	До 60 тестов в час
Объем памяти	10 000 результатов (включая все изображения)
Изображения	15 стандартных изображений полей зрения
Питание	100–250 В, 50–60Гц, 100 В
Интерфейсы	USB, Ethernet
Подключение ЛИС	По стандартным протоколам LIS2 A2 или HL7
Расходные материалы	Стандартные кюветы UriSed®

Прибор и принадлежности

Автоматический анализатор осадка мочи UriSed® Mini	UMI-9901
Кюветы для анализаторов мочи (уп. 600 шт.)	URS-9961-1



77 ELEKTRONIKA

77 Elektronika Kft.
Fehérvári út 98. H-1116 Budapest, Hungary
sales hotline: +36-1-481-0139
tel: +36-1-206-1480, fax: +36-1-206-1481
www.e77.hu

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс. +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.e77.ru

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.